



MANTENIMIENTO

DE LOS CONTRA-ÁNGULOS BIEN-AIR.

Consulte el manual de uso del producto, en el que se describen los procedimientos completos de mantenimiento, limpieza y esterilización. Este producto sanitario se entrega «sin esterilizar». Antes de utilizarlo, familiarícese con el presente procedimiento.

1 PREPARACIÓN



A. EXTRACCIÓN DEL VÁSTAGO



- Retire el instrumento rotativo del sistema de sujeción
- Desacople el contra-ángulo del motor

B. DESINFECCIÓN PREVIA

- Desinfección externa

⊘ No sumerja el instrumento en un baño desinfectante.

2 LIMPIEZA

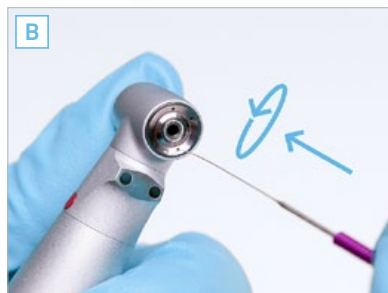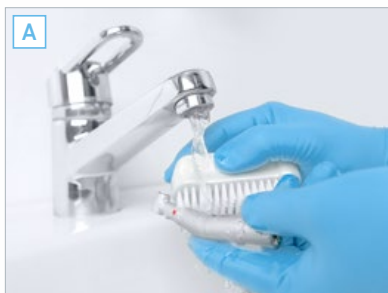

A. LIMPIE CON AGUA CORRIENTE < 38 °C

B. DESINCRUSTACIÓN

- Elimine minuciosamente la suciedad y las posibles incrustaciones de las toberas con el desatascador de spray
- Seque las toberas con aire comprimido y el resto del instrumento, con un paño

⊘ No sumerja el instrumento en un baño de ultrasonidos



C. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON SPRAYNET

- Agite el Spraynet antes del uso
- Utilice la boquilla Spraynet ①*
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Spraynet durante un segundo
- Limpie el exterior del contra-ángulo con un paño humedecido con Spraynet

3

DESINFECCIÓN



A. DESINFECCIÓN CON DESINFECTANTE DE SUPERFICIES (siga las indicaciones de uso del fabricante)

⊘ No sumerja el instrumento en un baño desinfectante

o

B. DESINFECCIÓN TÉRMICA
(siga las indicaciones de uso del fabricante)

4

LUBRICACIÓN



A. LUBRICACIÓN CON LUBRIFLUID

- Agite el Lubrifluid antes del uso
- Utilice la boquilla Lubrifluid ①*
- Sujete el instrumento con la cabeza hacia abajo protegido con un paño absorbente y accione la válvula del Lubrifluid durante un segundo
- A continuación, realice una prueba de funcionamiento durante 30 s a baja velocidad para eliminar el posible exceso de lubricante
- Almacenaje inmediato: coloque los instrumentos con la cabeza hacia abajo para que los residuos de aceite puedan escurrirse

5

ESTERILIZACIÓN



A. COLOQUE EL CONTRA-ÁNGULO EN UNA BOLSITA DE ESTERILIZACIÓN

B. ESTERILICE SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE

- Los instrumentos que llevan el símbolo  pueden esterilizarse en autoclave

⚠ No esterilice ningún instrumento que no haya sido limpiado y lubricado previamente

* Todas las referencias de las boquillas se encuentran en la última página del documento.

MANTENIMIENTO

ACCESORIOS



SPRAYNET
500 ml, spray de limpieza
Embalaje de 6 unidades
REF. 1600036-006



LUBRIFIUID
500 ml, lubricante
Embalaje de 6 unidades
REF. 1600064-006



AQUACARE
500 ml, spray de limpieza
Embalaje de 6 unidades
REF. 1600617-006



LUBRICARE
Sistema de
mantenimiento
REF. 1600915-001



LUBRIMED
Embalaje de 6 cartuchos
REF. 1600037-006



**DESATASCADOR DE
SPRAY**
Embalaje de 10 unidades
REF. 1000001-010